

Как заменить двойной резервуар Twin Bag™

Не забывайте о следующем:

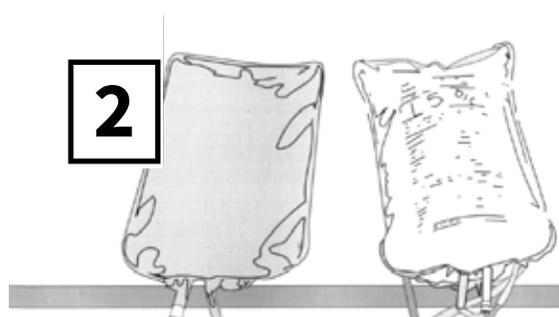
- Ношение маски
- Мытье рук
- Проверку наличия всех необходимых материалов
- Места подсоединения
- Проверку слитой жидкости
- Замену следует проводить в чистом месте, где отсутствуют сквозняки

1



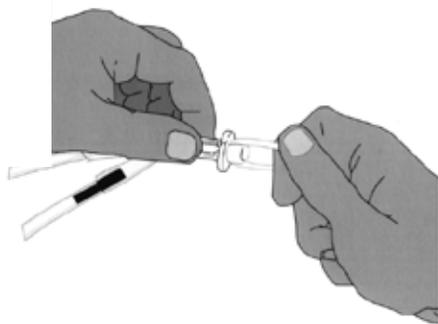
- Наденьте маску и вымойте руки.
- Разложите все необходимое для манипуляции на чистой поверхности.
- Проверьте резервуар Twin Bag™ на: прочность раствора, размер резервуара, срок годности и содержание кальция.
- Проверьте срок годности колпачка MiniCap.

2



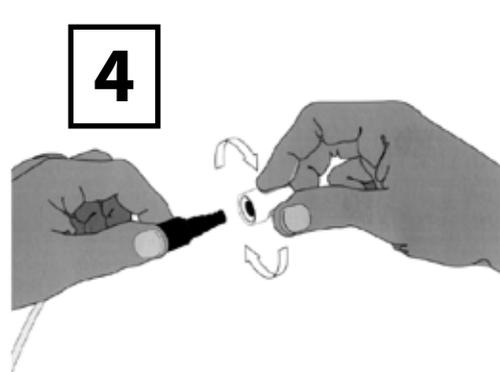
- Откройте резервуар Twin Bag™ и сухой резервуар.
- Проверьте полный резервуар на наличие утечек.
- Проверьте порты для лекарств.
- Проверьте пустой резервуар.
- Проверьте тяговое кольцо, зеленую пломбу и порт Y.

3



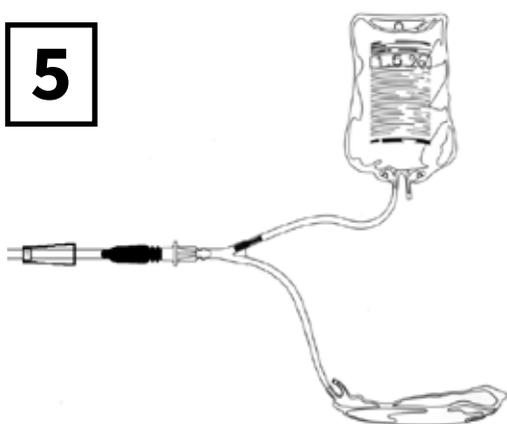
- Прикрепите клейкой лентой трубки в порту Y к столу.
- Откройте комплект для переливания и проверьте, закрыт ли зажим.
- Наденьте маску и вымойте руки гелем.
- Снимите тяговое кольцо.

4



- Снимите колпачок MiniCap из комплекта для переливания.
- Сразу присоедините соединитель Twin Bag™ к комплекту для переливания.

5



- Повесьте наполнительный резервуар и поместите дренажный резервуар на стойку.

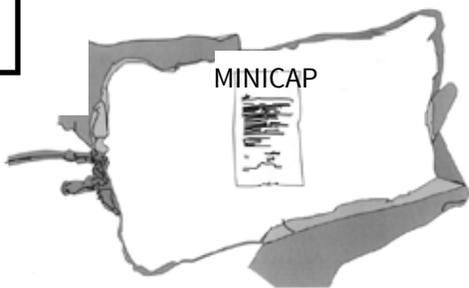
6



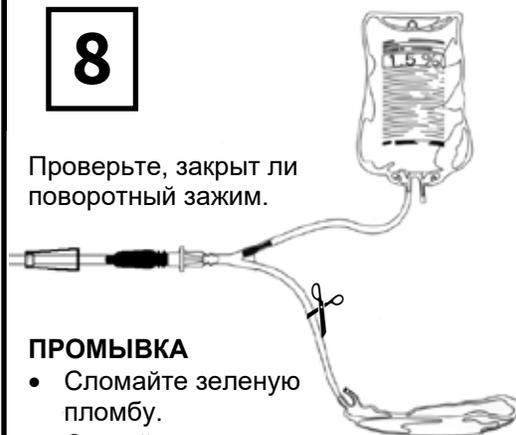
ДРЕНАЖ

- Откройте поворотный зажим для слива.

- После слива закройте поворотный зажим на комплекте для переливания.
- Установите зажим на сливную линию.
- Положите дренажный резервуар на стол, чтобы проверить его.

7

- Проверьте слитую жидкость на:
 - Прозрачность: если жидкость мутная, позвоните в отделение домашнего диализа.
 - Фибрин: если имеется фибрин, добавьте гепарин согласно инструкции.
 - Кровь: если вы также чувствуете боль, позвоните в свое отделение домашнего диализа.

8

Проверьте, закрыт ли поворотный зажим.

ПРОМЫВКА

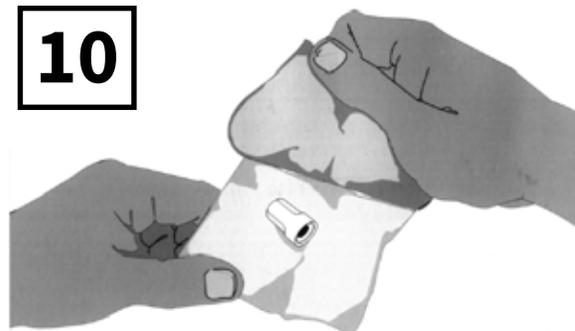
- Сломайте зеленую пломбу.
- Откройте зажим на сливной линии на 3 секунды.
- Закройте зажим на сливной линии.

9**ЗАПОЛНЕНИЕ**

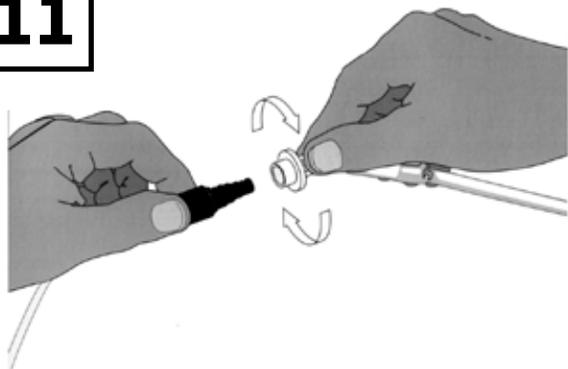
- Откройте поворотный зажим для заполнения.

После заполнения:

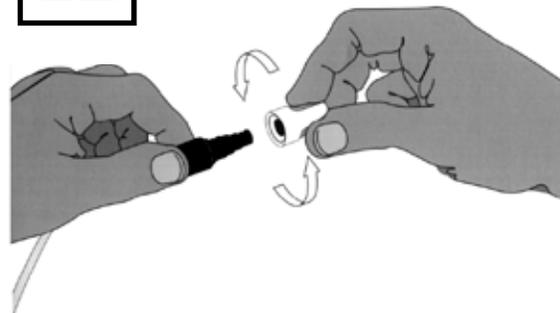
- Закройте поворотный зажим на комплекте для переливания.
- Установите зажим на линию заполнения.
- Проверьте, все ли 3 зажима закрыты.

10

- Наденьте маску.
- Вымойте руки гелем.
- Откройте пакет MiniCap.

11

- Открутите соединитель Twin Bag™ от комплекта для переливания. Держите комплект для переливания в руке.

12

- Немедленно наденьте новый колпачок MiniCap на комплект для переливания.
- Взвесьте дренажный резервуар и запишите вес.

Проблемы с дренажем - Twin Bag™

Проблема/причина:	Что делать:
1. Поворотный зажим	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте: открыт ли он?• Проверьте, не перегнута ли трубка под зажимом
2. Перегиб трубки	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте повязку.• Проверьте вдоль сливной линии.• Проверьте ленту на стойке.
3. Фибрин	<ul style="list-style-type: none">• Плотно оберните трубку вокруг карандаша и отпустите. (Повторите.)
4. Запор (невозможность покакать)	<ul style="list-style-type: none">• Принимайте слабительные средства в соответствии с указаниями врача.
5. Положение тела	<ul style="list-style-type: none">• Наклонитесь вперед и назад.• Встаньте или нажмите на живот (область живота).• Кашляните.• Убедитесь, что дренажный резервуар находится ниже вашего живота.
6. Воздушная пробка	<ul style="list-style-type: none">• Плотно оберните трубку вокруг карандаша и отпустите. (Повторите.)
7. Дефектный резервуар	<ul style="list-style-type: none">• Замените комплект на новый.

Проблемы с наполнением - Twin Bag™

Проблема/причина:	Что делать:
1. Поворотный зажим	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте: открыт ли он?• Проверьте, не перегнута ли трубка под зажимом
2. Перегиб трубки	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте повязку.• Проверьте трубку вдоль.
3. Зеленая пломба не сломана	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что зеленая пломба сломана. Вы должны видеть место, где вы сломали зеленую пломбу.
4. Положение тела	<ul style="list-style-type: none">• Наклонитесь вперед и назад.• Встаньте или нажмите на живот.• Кашляните.
5. Фибрин	<ul style="list-style-type: none">• Плотно оберните трубку вокруг карандаша и отпустите. (Повторите.)• Введите гепарин в наполнительный резервуар.• Сожмите резервуар.• Поднимите стойку.
6. Запор	<ul style="list-style-type: none">• Принимайте слабительные средства в соответствии с указаниями врача.
7. Дефектный резервуар	<ul style="list-style-type: none">• Замените комплект на новый.

Механические проблемы - Twin Bag™

Проблема/причина:	Что делать:
1. Комплект для переливания загрязнен с закрытым поворотным зажимом	<ul style="list-style-type: none"> • Наденьте колпачок MiniCap на 5 минут, затем снимите и наденьте другой колпачок MiniCap.
2. Во время отсоединения от Twin Bag™ не закрылся поворотный зажим на комплекте для переливания	<ul style="list-style-type: none"> • Закройте поворотный зажим на комплекте для переливания, наденьте колпачок MiniCap на 5 минут, затем снимите и наденьте другой колпачок MiniCap. • НЕМЕДЛЕННО позвоните в отделение домашнего диализа. Это чрезвычайная ситуация для диализа. Дежурная медсестра работает круглосуточно 7 дней в неделю.
3. Дырка в дренажном резервуаре	<ul style="list-style-type: none"> • Закройте поворотный зажим на комплекте для переливания, затем зажмите сливную линию. Наденьте колпачок MiniCap на комплект для переливания. • Выньте новую систему Twin Bag™ и продолжайте процедуру диализа.
4. Дырка в наполнительном резервуаре	<ul style="list-style-type: none"> • Закройте поворотный зажим на комплекте для переливания. • Зажмите трубку наполнения. • Наденьте колпачок MiniCap на комплект для переливания. • НЕМЕДЛЕННО позвоните в отделение домашнего диализа. Это чрезвычайная ситуация для диализа. Дежурная медсестра работает круглосуточно 7 дней в неделю.
5. Ваша трубка отсоединяется от катетера: >Точки соединения негерметичны >Катетер и трубка натянуты	<ul style="list-style-type: none"> • Используйте аварийный комплект. Поместите зажим катетера на катетер рядом с местом выхода. • Наденьте колпачок на конец катетера. • НЕМЕДЛЕННО позвоните в отделение домашнего диализа. Это чрезвычайная ситуация для диализа. Дежурная медсестра работает круглосуточно 7 дней в неделю.
6. Игла проходит через отверстие нового резервуара	<ul style="list-style-type: none"> • Используйте новый комплект Twin Bag™, а также новый шприц и иглу. • Используйте новое лекарство.
7. Новая жидкость попадает в дренажный резервуар	<ul style="list-style-type: none"> • Сделайте еще одну замену резервуара.
8. Загрязненный соединитель Twin Bag™	<ul style="list-style-type: none"> • Выбросите комплект. • Проверьте и подготовьте новый комплект.

Эта брошюра предназначена только для образовательных целей. Она не заменяет профессиональный совет поставщика медицинских услуг. Эта информация может не относиться ко всем ситуациям. Если у вас есть какие-либо вопросы, задайте их своему врачу.

Эту брошюру и все наши ресурсы для пациентов можно найти здесь:
<https://library.nshealth.ca/Patients-Guides>

Подготовлено: Программой лечения почек
Иллюстрации использованы с разрешения: Baxter Health Care ©
Разработано: Библиотечная служба здравоохранения Новой Шотландии

RU85-2379 © January 2025 Nova Scotia Health Authority
To be reviewed June 2028 or sooner, if needed.

